



ウォーキン・ホイールズ Mini

取扱説明書



らせん階段
TEL 0798-67-8419



Handicapped-Dogs.jp

<http://handicapped-dogs.jp>

e-mail: info@handicapped-dogs.jp



ウォーキン・ホイールズ Mini 取扱説明書

1. 安全に、正しく、お使いいただくために 2 ページ
2. ウォーキン・ホイールズ Mini のパーツを確認する 3 ページ
3. ウォーキン・ホイールズ Mini の組み立て方法 3-6 ページ

1	車輪の高さの調整
2	フレームの巾の調整
3	フレームの長さの調整
4	ウォーキン・ホイールズ Mini の適合サイズ
5	ウォーキン・ホイールズ Mini 組み立て完成写真
6	後肢を固定するストラップの取り付け
7	腹ベルトの取り付け
8	フレームの長さを、カップスクリューで固定する
9	車輪の高さを、カップスクリューで固定する
10	フレームの巾を、カップスクリューで固定する
11	レッグ・リングの装着と、ハーネスのフレームとの連結

4. ウォーキン・ホイールズ Mini 装着後の注意点 7 ページ
5. オプションのリア・リフトハーネス 7 ページ



らせん階段

TEL 0798-67-8419



Handicapped-Dogs.jp

<http://handicapped-dogs.jp>

e-mail: info@handicapped-dogs.jp


1. 安全に、正しく、お使いいただくために

ウォーキン・ホイールズ **Mini** は、お客様の愛犬の体型にぴったりフィットするように、フレームの幅、長さ、車輪の高さを調節することができます。

通常、装着後すぐに 自力で歩行するようになりますが慣れるまである程度の時間、または、日数を要する場合がありますので、決して飼い主さんがあせって無理強いをしないように気をつけてください。

- ※ 最初の段階は、「締め付け感」、「車輪の音」、「動く方向」などに慣れていないために、お客様の愛犬がフラストレーションを感じる場合があります。
- ※ まず愛犬がハーネスをつけることに慣れるようにしてから、ハーネスとウォーキン・ホイールズ **Mini** を連結するようにしてください。
- ※ なるべく周りに家具やドアなどの障害物のない広いスペースのあるところで愛犬を落ちつかせた状態で装着し、おやつなどを与えながら少しずつ歩行することに慣れさせるようにしてください。

概して動物は、動き出す時に「後肢」を使い、止まる時に、「前肢」を使用します。そのため、ウォーキン・ホイールズ **Mini** を装着した初期の段階では前進方向よりも、後退方向に動く傾向がありますので、飼い主さんが愛犬の前側に位置して、おやつなどで愛犬が前進するように誘導するようにしていただくと、徐々に前肢を動かして前進するコツを愛犬が体得していきます。

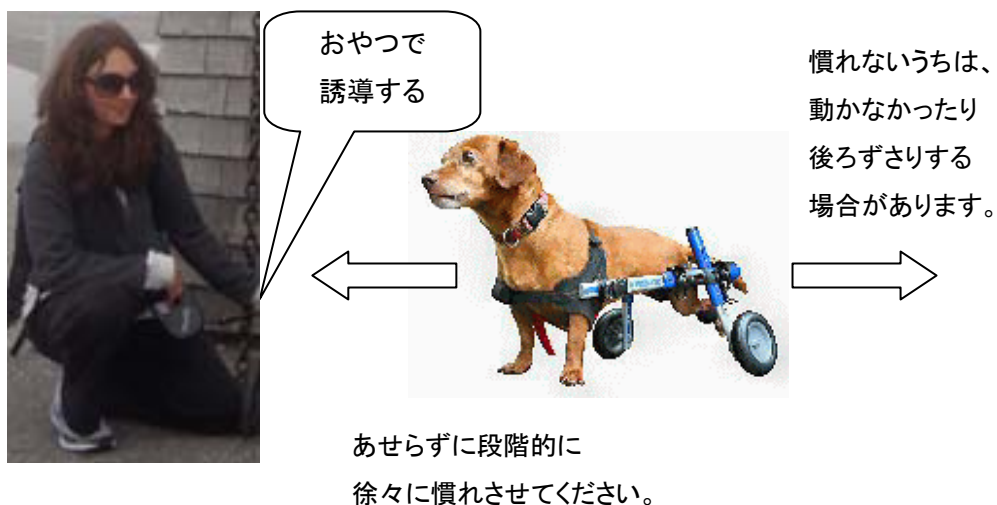

2. ウォーキン・ホイールズ **Mini** のパーツを確認する



A	フレーム本体 + レッグリング
B	車輪 4インチ(10cm)
C	ハーネス (クッション・スリーブ付き)
D	後肢を固定するストラップ
E	胴巾が広い愛犬に使う 交換部品(エクステンダー)
F	止めねじ(6個)と レンチ(固定する時に使用)
G	腹ベルト (胴が長い愛犬用)

3. ウォーキン・ホイールズ **Mini** の組み立て方法


(1) 車輪の高さの調整



フレームに、車輪を差込みます。
アレン・レンチの先でスナップボタンを
押さえて、車輪の高さを調節します。

※ 車輪の高さが足りない場合は、
青い部分のシャフトの位置を
下にずらすことも可能です。

(2) フレームの中巾の調整

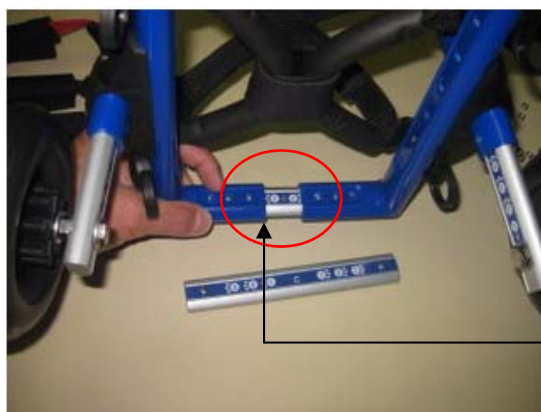

アレン・レンチの先でスナップボタンを
押さえて、巾を広めることができます。

※ 最初から付いているパーツの巾で
足りない場合は、長い方の交換パーツ
(エクステンダー)と取り替えてください。

(9) 車輪の高さを、カップスクリュー(止めねじ)で固定する



車輪の高さの調整後、止めねじで
左の写真の箇所を固定します。

※ 付属のアレン・レンチを使用

(10) フレームの巾を、カップスクリュー(止めねじ)で固定する



フレームの巾の調整後、
止めねじで、左の写真の箇所を
固定します。

※ 付属のアレン・レンチを使用

(11) レッグ・リングの装着と、ハーネスとフレームとの連結



ハーネスは、赤い色のベルトを愛犬の
腹部側にまわしてクリップで固定します。
ハーネスのループに、フレームを通し
左の写真のようにクリップで固定します。

レッグ・リングの端の黒いプラスチックのパーツを
フレーム外側の留めピンにあわせ、上方向に引き上げると
カチッと音がして固定されます。

レッグ・リングは、弛まないようにセットします。



(3) フレームの長さの調整




アレン・レンチの先で、スナップボタンを押さえて、フレームの長さを調整できます。



※ スナップボタン

25cm から 43cm まで調整可能

(4) ウォーキン・ホイールズ Mini の適合サイズ

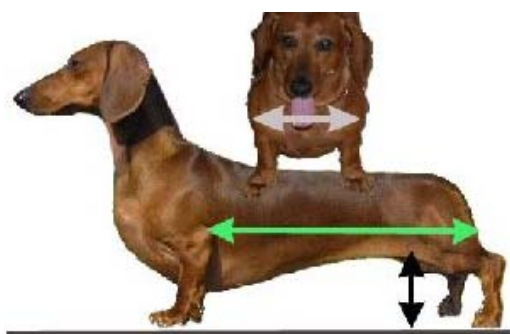

胸の巾	10cm ~ 20cm
胸の長さ	25cm ~ 43cm
後肢の高さ	8cm ~ 25cm

(5) レッグ・リングが付いたフレームに、ハーネスを連結した写真



ハーネスは、**赤いベルトの方**が
下(腹側)に位置するようにします。

ハーネスは、フレームに連結する前に
愛犬に装着しておきます。

その後、ハーネスとフレームを連結します。



(6) 後肢を固定するストラップの取り付け



ストラップのフックをフレーム後部の留め金に引っ掛けます。

後肢が多少動かせる状態の時はストラップで固定する必要はありませんが後肢が動かない場合は、このストラップに後肢首を固定します。

※ ストラップは伸縮性のあるゴム製で長さを調節することができます。

(7) 腹ベルトの取り付け



胴の長い愛犬、または重めの愛犬の場合に、腹ベルトを取り付けると愛犬の負担が減少します。

(8) フレームの長さを、カップスクリュー(止めねじ)で固定する



フレームの長さが決まればがたがたしないように、止めねじで左の写真の箇所を固定します。

※ 付属のアレン・レンチを使用

4. ウォーキン・ホイールズ Mini 装着後の注意点

- ◆ スペースに余裕のある場所で、装着の具合を試してください。
- ◆ 愛犬が嫌がったり、驚いたりした場合は、一旦取り外し落ち着きを取り戻してから再度装着するようにしてください。
- ◆ 愛犬の動き方がおかしい場合は、ハーネスの締め付け具合、フレームの長さ、車輪の高さを再調整してください。
- ◆ 愛犬が動かない場合は、おやつで誘導してみてください。
- ◆ 最初は、短時間の装着を繰り返し徐々に慣らすようにします。
- ◆ ウォーキン・ホイールズ Mini は、運動させながらのリハビリを目的に設計されていますので、装着したまま伏せはできません。
(※) 通常、装着したままで小用、用便は可能です。
- ◆ ベルト類が長すぎる場合は、適度の長さで切断し切断面をライターの火であぶるともつれてきません。




ハーネスは、赤い部分が腹側にまわるようにセットします。
クッション・スリーブ(C)は、適当にはさみで切って短くしてベルトの長さを調整できるようにしてください。

5. オプションのリア・リフトハーネス

愛犬の後部にかかる負担を軽くし、より快適な装着性が得られるリア・リフトハーネスは、オプション(別売り)で注文することができます。



標準装備のレッグ・リング

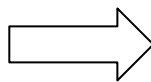

リア・リフトハーネス(別売り)